

MANUALE DI COMPILAZIONE DEI CAMPI IN MEDITEX PER L'ESPORTAZIONE CORRETTA DEL MODULO ATTIVITÀ E RISULTATI-TECNICHE II E III LIVELLO DELL'ISS

Il modulo in questione conta il numero di cicli di II e III livello dell'anno in questione.

La data di inizio ciclo, per cicli a fresco è calcolata con il seguente criterio:

- Se presente DATA INIZIO STIMOLAZIONE
- Altrimenti:
 - Primo dosaggio ormonale o ecografia effettuata
 - Data ultima mestruazione

La data di inizio ciclo, per cicli da scongelamento è calcolata con il seguente criterio:

- Se presente DATA INIZIO ESTROGENO
- Altrimenti:
 - Data inizio primo farmaco somministrato
 - Data ultima mestruazione

Perché i cicli vengano considerati nella sezione in Figura 1 è necessario inserire:

Pazienti trattati "a fresco"	Cicli a fresco per classi di età delle pazienti e tecnica
Numero pazienti trattati con Tecniche di II e III livello: <input type="text"/>	Numero cicli su pazienti trattati residenti nella regione: <input type="text"/>
Numero pazienti trattati residenti nella regione: <input type="text"/>	Numero cicli su pazienti trattati residenti in altra regione: <input type="text"/>
Numero pazienti trattati residenti in altra regione: <input type="text"/>	Totale <input type="text"/>

Figura 1

- Regione di Residenza della paziente (**Anagrafica**→**Modifica Persona**→**Dettagli Contatto/Occupazione**→**Indirizzo**)

Anagr. Paziente

Dettagli pers. | **Dettagli Contatto/Occupaz.** | Assicurazione / fatturazione

Dettagli contatto

Tel

Cellulare

Fax

Email

Indirizzo

Via/N.

Indirizzo aggiuntivo

Periferia

CAP

Comune

Provincia

Regione

Nazione

- Regione del Centro (**Sistema→Configurazione/Amministrazione→Impostazioni→Clinica**)

The screenshot shows the 'Impostazioni' window with the following fields:

- Dati Centro:** ID Clinica (6004), Id ISS, N.Med.
- Nome:** Itamedical
- Sigla:** Itamedical
- Nome 1, 2, 3:** (Empty)
- Via:** Via prova 5
- CAP:** 36100
- Città:** Vicenza
- Provincia:** (Dropdown)
- Regione:** Veneto (highlighted with a red box)
- Telefono, Cellulare, Email, Aggiunta:** (Empty)
- Fax:** (Empty)

Perché i cicli vengano considerati nella sezione in Figura 2 è necessario inserire:

Pazienti secondo il principale fattore di indicazione alle tecniche di II e III livello	
Solo fattore tubarico:	<input type="checkbox"/>
Solo infertilità endocrina-ovulatoria:	<input type="checkbox"/>
Solo endometriosi:	<input type="checkbox"/>
Solo ridotta riserva ovarica:	<input type="checkbox"/>
Solo poliabortività:	<input type="checkbox"/>
Solo infertilità maschile:	<input type="checkbox"/>
Infertilità idiopatica:	<input type="checkbox"/>
Fattore sia maschile che femminile:	<input type="checkbox"/>
Fattore multiplo femminile:	<input type="checkbox"/>
Fattore genetico:	<input type="checkbox"/>

Figura 2

In dettagli terapia è necessario inserire nel campo INDICAZIONE GENERALI una delle seguenti opzioni:

- Solo fattore tubarico
- Solo infertilità endocrina-ovulatoria
- Solo endometriosi
- 2°/3° Solo ridotta riserva ovarica
- 2°/3° Solo poliabortività
- 2°/3° Solo infertilità maschile
- 2°/3° Infertilità idiopatica
- Fattore sia maschile che femminile
- 2°/3° Fattore multiplo femminile
- Fattore genetico
- Se il campo rimane vuoto il ciclo non verrà contato in questa sezione

Ciclo - 2032139; Demo*, Jane

Demo*, Jane 12/09/1979 (36) **Demo, John** 05/08/1975 (40)

Generale | Misure aggiuntive

Trattamento: FIVET

IVM Preservazione fertilità Congelamento ovociti

Donazione (Ovo/Emb) Ric. (OVO/EMB) ET a madre in surroga surroga

ID anonimo terapia

Data UM: 08/01/2016

Terapia da amenorrea

Indicazioni generali

Protocollo

Stimolazione prog.: Non indagata

Medic. lungo termine

N. di embrioni da trasferire: 0

Raccolta pianificata seme: Nessuna selezione

Medico: M., M. Dr.

ID Indagine

Gruppo randomizzazione

Trasferita dal Centro

Trasferita il

Fatturazione: Integr. DGR

Costi coperti da assicur.:

Anamnesi

Anamnesi donna del: 01/01/2015

Anam.: 01/01/2015
Malattie Prec.: Nessuna
Indic.: ETA*, Fattore tubarico-aderenziale, Fattore ovulatorio
Cromos.: Non effettuato
CFTR: Non eseguito

Anamnesi uomo del: 01/01/2015

Anam.: 01/01/2015
Malattie Prec.: Condizioni psichiche / psichiatriche preesistenti
Indic.: sconosciuto
Cromos.: nessuna anomalia rilevata
CFTR: Non portatore

Note

Annulla OK

Percorso: Terapia → Dettagli Terapia

Perché i cicli vengano considerati come sospesi nella sezione in Figura 3 è necessario, cancellare il ciclo prima del trattamento in overview terapia.

Cicli "a fresco" (inclusi IVM)			
Numero di cicli a fresco per tecnica			
	Cicli iniziati	Cicli sospesi	Cicli giunti al prelievo
da GIFT:	■	■	■
da FIVET:	■	■	■
da ICSI:	■	■	■

Figura 3

dicembre 15

Ind. ovocitaria

	me 16. 1	gi 17. 2	ve 18. 3	sa 19. 4	do 20. 5	lu 21. 6	ma 22. 7	me 23. 8	gi 24. 9	ve 25. 10
Eventi	UM									
[-] Farmaco										
[-] Altro										
PAZIENTE PRONTO										
[-] Ormoni										
E2 [pg/ml]										
FSH [mIU/ml]										
HCG [mIU/ml]										
LH [mIU/ml]										
Progesterone [ng/ml]										
[-] Ecografia										

Context Menu:

- UM Imposta data UM
- CA Annulla la terapia prima del trattamento**
- Trasferisci terapia
- X Imposta data fine terapia
- Stampa

Percorso: Overview Terapia → tasto destro sulla linea degli eventi → Annulla la terapia prima del trattamento

ITAMEDICAL Srl Via del Commercio 56 36100 VICENZA

Tel +39.347.3065710 info@itamedical.it www.itamedical.it

P.I./C.F. e Reg.Impr. di VI: 03621120249 REA 339857 Capitale Sociale € 10.000 i.v.

Successivamente al fine di far comparire i cicli nella sezione in Figura 4 è necessario selezionare una delle seguenti opzioni di sospensione del ciclo.

Cicli sospesi

Totale cicli sospesi:

per Mancata risposta:

per Risposta eccessiva:

per Volontà della coppia:

Altro:

Figura 4

- Prelievo sospeso per mancata risposta alla stimolazione
- Ciclo sospeso per rischio iperstimolo
- Volontà coppia
- Altro

Interruzione prima del trattamento ✖

Causa principale:

Causa aggiuntiva:

Affinché i cicli da scongelamento vengano correttamente inseriti nel documento è necessario inserire la tecnica di scongelamento utilizzata (nel caso di cicli da scongelamento di embrioni FER, mentre per ovociti FO-Lento o FO-Vitrif)

Cicli da scongelamento

Totale pazienti da scongelamento:

	da FER	da FO-Lento	da FO-Vitrif
Numero totale di pazienti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Crioscongelamento - 2032139; Demo*, Jane ✖

PU Originale

Data crioservazione

Età embrione Giorni

Clinica d'origine

Data scongelamento

Tecnica scongelamento

Scongelato da

Percorso: Coltura → Scongelamento

Gli ovociti non utilizzati che verranno conteggiati nella sezione in figura 5 sono quelle cellule che al giorno zero non vengono né inseminate né congelate.

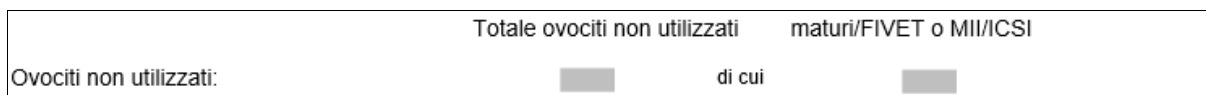


Figura 5

n° Ooc.	↓	SP	Giorno 0	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5
ID Ooc. Tratt.			01/01/2016	02/01/2016	03/01/2016	04/01/2016	05/01/2016	06/01/2016
1	ET	SP1						
584	ICSI							
2								
585								
3								
586								
4								
587								
5								
588								
6								
589								
7								
590								

In questa figura ci sono 5 ovociti non utilizzati di cui solamente 1 è MATURO/MII (numero 3)

Gli embrioni non evolutivi che verranno conteggiati nella sezione in figura 6 sono quegli embrioni che in due giorni diversi della coltura avranno lo stesso stato di sviluppo, degenerano, vengono arrestati o scartati.



Figura 6

Giorno 0	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6
15/12/2014	16/12/2014	17/12/2014	18/12/2014	19/12/2014	20/12/2014	21/12/2014
		1°	1°			
		1°/2°	1°/2°			
		2°	2°/3°		2°/3°	
		2°	1°			

In questa figura sono riportati i 5 modi per rappresentare embrioni non evolutivi

Affinché i cicli vengano considerati nella sezione in Figura 7 è necessario che non sia stato eseguito il transfer e sia stata inserita una di queste motivazione:

Interruzioni tra il prelievo e il trasferimento (vedi specifiche a fine report)	
Totale cicli interrotti:	■
<i>Cicli interrotti per:</i>	
nessun ovocita prelevato:	■
totalità degli ovociti non idonei (immaturi, degenerati):	■
tutti gli ovociti congelati per rischio OHSS:	■
mancanza di spermatozoi:	■
mancata fertilizzazione:	■
mancato clivaggio:	■
tutti gli zigoti/embrioni congelati per rischio OHSS:	■
paziente non disponibile:	■
tutti ovociti/embrioni congelati non per rischio OHSS:	■
altro:	■

Figura 7

- Nessun ovocita prelevato
- Totalità degli ovociti non idonei
- Tutti gli ovociti congelati per rischio OHSS
- Mancanza di spermatozoi
- Mancata fertilizzazione
- Mancato clivaggio
- Tutti gli zigoti/embrioni congelati per rischio OHSS
- Paziente non disponibile
- Tutti gli ovociti o zigoti/embrioni congelati NON per rischio OHSS
- Altro
- Se il campo rimane vuoto il ciclo non verrà contato in questa sezione

Percorso: Coltura → motivo per nessun ET

Perché i cicli vengano contati nella sezione in Figura 8 è necessario, inserire una delle seguenti opzioni nel campo complicazioni del Trattamento in overview terapia.

ITAMEDICAL Srl Via del Commercio 56 36100 VICENZA

Tel +39.347.3065710 info@itamedical.it www.itamedical.it

P.I./C.F. e Reg.Impr. di VI: 03621120249

REA 339857

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

Complicanze (sia a fresco che da scongelamenti):	
Sindrome da iperstimolazione ovarica severa:	<input type="checkbox"/>
Complicanze al prelievo:	<input type="checkbox"/>
Sanguinamento:	<input type="checkbox"/>
Infezione:	<input type="checkbox"/>
Morte materna:	<input type="checkbox"/>

Figura 8

Overview terapia			
Tratt.: FIVET # Emb.: 0 [0]	Data UM: 19.01.2010	Estroprogestinco	Complicazioni tratt.
Indicazioni generali:		<input type="checkbox"/> OHSS	<input type="checkbox"/> Complicanze al prelievo
Protocollo:		<input type="checkbox"/> Sanguinamento	<input type="checkbox"/> Infezione
Med. a lungo termine		<input type="checkbox"/> Morte materna	
Pianif. raccolta seme: Nessuna selezione			
Pianif. misure aggiuntive:			
Indicazione PBD:			
Indicaz. PGD:			
Note			

- OHSS
- Complicanze al prelievo
- Sanguinamento
- Infezione
- Morte materna

Infine per il conto delle gravidanze è necessario inserire l'esito del ciclo nella Sezione Gravidanza e il numero di cavità intra e extrauterine.

Gravidanze						
Gravidanze ottenute (sia a fresco che da scongelamenti) - (vedi specifiche a fine report)						
	da GIFT	da FIVET	da ICSI	da FER	da FO-Lento	da FO-VitriF
Numero totale di gravidanze per tecnica:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 9

Overview	Pick up	Coltura	Transfer	Fase luteale	Gravidanza	Nascita
Inizio: 03/11/2015 Tratt.: Scong/transf...	27/10/2015 00:00 #Ovo: 3	N. Ov.: 3 n. 2PNs: 3 n. Emb: 2	03/11/2015 00:00 #Emb: 2 #PN: 1	Farmaco: OHSS:		
Gravidanza						
Risultato ciclo <input type="checkbox"/> Sconosciuto <input checked="" type="checkbox"/> Grav. clinica <input type="checkbox"/> No gravidanza				Test grav. posit.	Ultimo bHCG: Data:	
Progresso Ecografia						
Gravidanza clinica determinata il			Cav. amniotiche: N. intrauterine <input type="text" value="1"/> N. extrauterine <input type="text" value="1"/>		Note	
Data presunta parto (DPP)		05/07/2016	Se EU > 0: La gravidanza quindi è terminata? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
N° settimane e giorni di gravidanza fino ad oggi		[14+2]				